



Welch Allyn

MacroView™ otoskop og
Digital MacroView™ otoskop



MacroView-otoskoper med vidvinkel giver forbedret og lettere visualisering af øret



WelchAllyn®

Welch Allyn MacroView-otoskop er et banebrydende koncept inden for otoskopi




Welch Allyn Digitalt MacroView-otoskop tilbyder en mobil digital billedtagningsløsning

MacroView-otoskopet leverer et næsten tre gange større visningsområde - en næsten komplet visning - ved højere forstørrelse sammenlignet med standardotoskoper, hvilket gør det nemmere at visualisere øregang og trommehinden.

En større, bedre, skarpere visning

Ca. **3x større visningsområde** og **30 % større forstørrelse** end ved traditionelle otoskoper

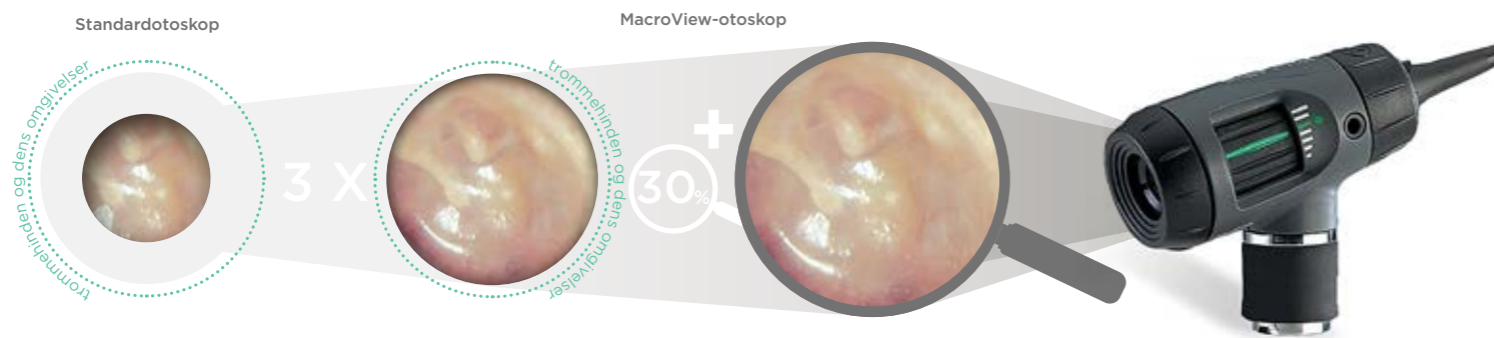

Yderligere funktioner:

- En næsten komplet visning af trommehinden
- Bedre klarhed og definition af landemærker
- Muligheden for at justere fokus* i forbindelse med variabel længde af øregangen eller langsynethed hos lægen
- Tip Grip for fastgørelse og afskydning af ørespekula
- Insufflationsport til pneumatisk otoskopi
- Fiberoptik producerer et køligt lys uden genskin eller hindringer
- Fås med SureColor™ LED-pære eller halogen HPX®-pære
- Giver dig mulighed for at se små detaljer på dræn og høreapparater

* Dybdeskarphed fra 4 til 140 mm, fokus fra spidsen af 4 mm spekulum



FORBEDRER VISUALISERINGEN AF ØRERNE

Ud over funktionerne i MacroView-otoskopet giver Digital MacroView-otoskopet dig mulighed for at dele billeder med familiemedlemmer eller andre læger og gemme stillbilleder sammen med patientens elektroniske journal for at følge udviklingen.

Optag, gem, zoom, send og modtag

- Et fantastisk værktøj til børnelæger, kliniske undervisere og andre, der jævnligt udfører otoskopi
- Del nemt billeder/videoer med andet sundhedspersonale som en visuel reference
- Letter kommunikation og undervisning, hvilket kan forbedre patientcompliance
- Gem digitale billeder i patientjournalen for at give forbedret dokumentation af undersøgelsen



SE DET. DEL DET. GEM DET.

PRODUKTANMELDELSER:

"Efter undersøgelse af patienter med MacroView... Jeg er imponeret over dets brugervenlighed og den forbedrede visning af trommehinden, det giver"

Andrew J. Shuman, MD "New Products for Pediatrics" Contemporary Pediatrics, USA Edition, Dec., 2004. Print.

"Welch Allyn MacroView opfylder en række grundlæggende krav for at udføre denne procedure (pneumatisk otoskopi)...Det er vigtigt, at lyset fra otoskopet er tilstrækkelig stærkt, og at enheden er lufttæt..."

Benito Orejas, J.I. et al. "Otoscopia neumática (Pneumatic Otoscopy)". Rev. Pediatr. Aten Primaria (Spain), 2015, vol.17, n.68 pp.e279-e288.



En prisbelønnet teknologi

Welch Allyn modtog prisen Global R&D 100 Award som anerkendelse af den teknologiske betydning for MacroView-otoskopet.



MacroView 3,5 V-otoskop med svælgilluminator og 3,5 V litium-ion genopladeligt håndtag

Patenteret "Tip Grip" sikrer, at spekula er sikkert fastgjort og afskyder det brugte ørespekulum, så det er nemt at bortskaffe

Insufflationsport til pneumatisk otoskopi

Justerbart fokushjul* hjælper dig med at tage højde for variabel øregangslængde, og gør det muligt at zoome ind eller ud for at finjustere visningen og give en mere komfortabel undersøgelse - især for langsynede læger

Avanceret optik giver dig næsten 3x større visningsområde og 30 % større forstørrelse end et konventionelt otoskop

Kompatibel med alle Welch Allyn 3,5 V-strømkilder

Vælg den konfiguration, der passer bedst til din praksis og arbejdsdag



Fås med Welch Allyn SureColor LED

Unik og patenteret lysdiodeteknologi specielt designet til kliniske anvendelser

SURECOLOR™

LED



7-års
GARANTI

SER UD SOM HALOGEN

SureColor LED

De fleste konkurrenters LED



> Optimeret farvetemperatur, som ligner halogen

> Lyset er for skarpt eller for hvidt, så det kan udviske kritiske detaljer

30X LÆNGERE LEVETID

> testet til 30x halogen-pærer


> 7 års garanti



ENERGIEFFEKTIVITET

> Op til 3x så lang brugstid vs. halogen med Welch Allyn 3,5 V genopladelig håndtag

> Lavere driftstemperatur beregnet til at give større komfort for patienten/klinikeren

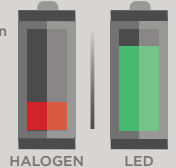

Bestillingsoplysninger

(Pærer kan udskiftes- det samme hoved virker både med SureColor LED-pære og Halogen HPX-pære)

MacroView- og Digital MacroView-hoveder

- 23820-L** MacroView 3,5 V-otoskop med svælgilluminator og SureColor LED-pære
- 23820** MacroView 3,5 V-otoskop med svælgilluminator og halogen HPX-pære
- 23810-L** MacroView 3,5 V-otoskophoved med SureColor LED-pære
- 23810** MacroView 3,5 V-otoskophoved med halogen HPX-pære
- 23920** Digitalt MacroView 3,5 V-otoskop med svælgilluminator og halogen HPX-pære

Tilbehør

- 52432-U** 2,75 mm universal KleenSpec® pædiatrisk ørespekulum til engangsbrug
- 52434-U** 4,25 mm universal KleenSpec® ørespekulum til engangsbrug
- 24320-B** SofSeal spekulumpspids til engangsørespekulum, lille
- 24330-B** SofSeal spekulumpspids til engangsørespekulum, medium
- 23804** insuffleringsbold og -slange
- 52700** 4,00 mm KleenSpec-instrumenteringsspids med åbning til engangsspekulum
- 06500-U** Halogen HPX-udskiftningspære
- 06500-LED** SureColor LED udskiftningspære



KleenSpec med SofSeal-spids



52700



23804

Se hele Welch Allyn's portefølge af instrumenter til helbredsundersøgelse på <http://emeai.welchallyn.com>, eller ring til os på **+353 46 906 7700**.



Welch Allyn EMEAI kundeservice

IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath, Ireland
Tel: +45 38 48 73 57
nordicorders@welchallyn.com

WWW.WELCHALLYN.DK

WelchAllyn®

Hill-Rom

©2018 WELCH ALLYN, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. DOK. NR: SM4161DK REVA MC13934, JAN 2018

MacroView- og Digital MacroView-otoskoper er beregnet til brug af klinikere og medicinsk uddannet personale til direkte at observere strukturer i øregangen og trommehinden på alle typer patienter.

Medicinsk udstyr (93/42/EEC): Klasse I.

Producent: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA.

EU-rep.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland.

Dette medicinske udstyr er lovgivningsomfattede sundhedsprodukter, som i henhold hertil bærer CE-mærket. Welch Allyn anbefaler, at du omhyggeligt læser de detaljerede anvisninger vedrørende sikker og korrekt brug i de dokumenter, der leveres sammen med det medicinske udstyr. Personalet på hospitaler er ansvarlig for korrekt brug og vedligeholdelse af dette medicinske udstyr. Welch Allyn forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, specifikationer og modeller uden varsel. Den eneste garanti, Welch Allyn giver, er en udtrykkelig skriftlig garanti, der omfatter salg af dets produkter.